

vademecum ENDODONCIA

Apertura de
cavidades y excavación

830-012

Apertura de cavidades ◀

Diamante natural policristalino
con tratamiento de oro
antioxidante



HXU1.CA DIA021

► Patente "Disteno"


La combinación de las hosas con el diamante
aumenta el control y elimina las vibraciones

Este tipo especial de fresa puede eliminar
pequeñas porciones de esmalte sin necesidad de
utilizar la turbina.



fresissima

Apertura de cavidades y excavación

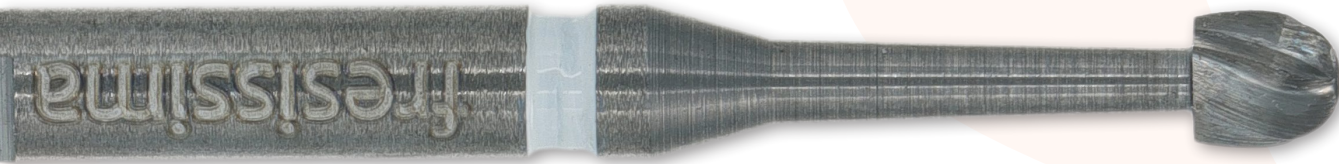


HXU1.CA.021

► *Excavación*

CT integral, evita la oxidación

Filo en la cabeza, trabaja verticalmente

Cuello delgado para mejor visibilidad.

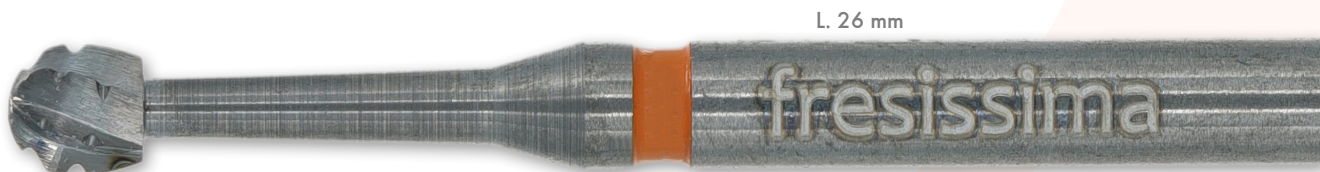

HSN8A.CAL.023

Excavación ◀

Longitud total 26 mm

Llega fácilmente a la entrada del conducto radicular

Corte dentado, sin vibraciones

Cuello fino para excelente visibilidad.

Perforación y/o Remoción de Coronas



HDZ802.314.021C

► Reendodancias

Diseñada para la perforación de coronas de zirconio, cerámica y metal

La punta tiene un agujero central para uso vertical

Las ranuras en el soporte metálico reducen la fricción y el sobrecalentamiento.



MAGIK DISK

► Corte de cerámica y metal

Disco para cortar cerámica y metal

El diamante macizo corta superficies duras sin dañar los tejidos blandos.



ZIRC CUT MAGIK

Corte de Zirconia ◀

Ataque CA para máximo control

Dentado para evitar la producción de chispas

Cuello estrecho para mayor profundidad de corte.

Perforación y/o Remoción de Coronas



UHD835.314.016UG

► *Corte de Zirconia y cerámica*

Diamante de larga durabilidad

Grano ultra grueso.



HXU76.314.012

Metales duros ◀

Carburo de tungsteno monobloque

Corte cruzado

Corta rápidamente en ausencia de vibraciones.

Rettifica camera pulpare



851-016

► Fresa para endo

Cabeza lisa inactiva

Evita perforar la cámara pulpar

Evita crear microescalones.



H269GK.FGSL.016

Cabeza lisa con mango extra largo ◀

Carburo de tungsteno monobloque

12 hojas helicoidales

Cabeza lisa no cortante en línea con la parte cortante para evitar la formación de escalones

Longitud de 30mm



H269GK.314.016

► Cabeza lisa y redondeada

12 hojas inclinadas, superficies más refinadas y homogéneas

Cabeza lisa inactiva en línea con la parte cortante

Minuscolo para evitar formar pequeños escalones.

Insertos ultrasonicos

VIBRA PS10DIA

► *Grano medio (anillo azul)*

Elimina calcificaciones en la cámara pulpar

Elimina materiales extraños en retratamientos canales

Acceso directo para remover instrumentos rotos.

Grano fino (anillo rojo) ◀

Localiza rápidamente los conductos obstruidos, ensancha la entrada del canal radicular

7mm de parte diamantada, suficiente para acabar las paredes de la cámara pulpar

Fácil identificación del grano.



VIBRA E24

► *Longitud 24mm y 31mm*

Excepcional para remover instrumentos fracturados, obstrucciones, calcificaciones, etc.

También se usa para activar el hipoclorito de sodio.




VIBRA E31 DIA M

► *Longitud 24mm y 31mm*

Excepcional para alisar la primera parte del conducto

Pueden ser usados como ayuda para remover instrumentos fracturados.

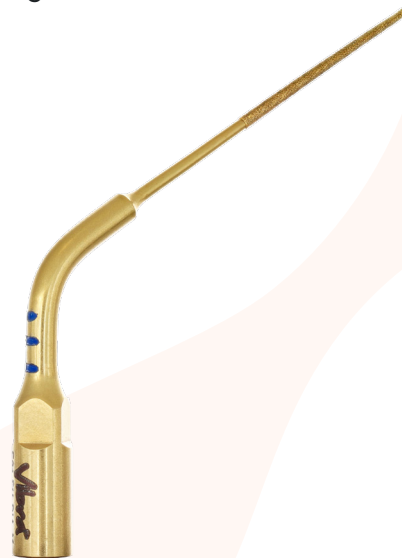

Acceso al canal



UHD801XL.314.008

► Acceso a la entrada del conducto

Diámetros "miniaturizados"

Rapidez en localizar la entrada

Útil para remover postes de fibra de los canales.



206 FRESISSIMA

► Grano medio

Troncocónica de cabeza plana

Longitud total 22mm

Trabaja en cavidades más profundas.



H1SL1.206.012

Localización de canales radiculares ◀

Diámetros reducidos para fácil acceso a la cavidad

Cuello estrecho para mejor visibilidad

Longitud total 31mm.



801.FGSL.016 GK

Cabeza lisa en forma de bola ◀

Trabaja en "tracción"

Cabeza lisa para trabajar en cavidades sin dañar el suelo de la cámara pulpar

Cuello largo y fino.



HXU267.FGSL.016

- ▶ *CT extra-duro monobloque*

Longitud total 30mm

Cabeza piramidal

Facilita la inserción de los botadores.



DKO254 BN.316

- ▶ *CT extra-duro monobloque*

Alta capacidad de corte

6 cinceles en la cabeza

Perfora y corta

Tratamiento DKO.



H260.317.008

- ◀ *CT extra-duro monobloque*

Corte suave y polivalente

Diámetro reducido, solo 008

Enfoque "conservador".

Tratamiento canalar



ENDOOK[®]
STRUMENTI CANALARI

LINEA EERO

Instrumentos endo-canal en NiTi,
realizados por ELECTRO-EROSIÓN

Sin memoria elástica

Excelente flexibilidad

Alta resistencia.

VM 176.814.035

► Lima Hedstrom

Mango ergonómicamente mejorado

Tamaños disponibles 15-20-25-30-
35-40



SM 229L SLIM CA

Limpieza ◀

Cepillo flexible de nylon

Elimina fácilmente los residuos de los conductos

Se utiliza en sentido antihorario

También disponible cónico SM229.050.



Instrumentos de Remoción

VMP202.05 MB

- ▶ *Mini Stieglitz*

Ángulo de 45°

Dimensiones reducidas
manejeable.



VM-P204.06 M

- ▶ *Remoción de fragmentos radiculares*

Puntas cónicas y delgadas para
mejor acceso a los alveolos

Excelente agarre del fragmento

Ángulos de 90°, 45° y 0°



Instrumentos de Remoción



VM - S216.53

► Para obturación



VM - S142.05

► Para medicación

Fácil de limpiar — Agarre antideslizante — Fácil de manejar.



VM - J315.00

► *Para anestesia*

Hecho de acero inoxidable

Alta resistencia y durabilidad

Universal para todos los viales.

VM2MIRRORTRE

Total reflex system ◀

Sistema de doble espejo

Reflexión de luz hasta un 98%

Reflexión "real" 1 a 1

VM R301.01 (Mango hexagonal)



vers. 07/24