

vademecum ORTODONCIA

CUIDADO Y PREVENCIÓN

805.313.012



► *Mango corto* ◀

Longitud reducida ideal para odontopediatría.

835.313.010



835-006

Micro cavidades ◀

Micro cilíndrica

No invasiva para pequeñas cavidades.



VIBRA PS10DIAM

► *Insertos Vibra DIA*

Preparación de cavidades mediante ultrasonidos.



fresissima



DFG J 001

► *Bola miniaturizada*

Diamante de larga durabilidad
Diámetro de solo 0,6 mm
Excelente para sellados y micro cavidades.

DFG J 277

Bola miniaturizada ◀

Diámetro 0,8 mm
Cuello fino y mango corto

Diseñado para preparaciones de pequeñas cavidades.



HL 6 FACCE

► *Fresa piramidal para sellados*

La parte activa hexagonal en carburo de tungsteno elimina el tejido cariado sin afectar el tejido sano.

368-010F

Football ◀

Pequeña parte activa de solo 1 mm de diámetro, perfecta para acabado de composite en zonas oclusales.



2401

► *Gomas de pulido*

Primer paso
Pulido de empastes de composite.

2501

Gomas de pulido ◀

Segundo paso
Pulido de empastes de composite.



EXTRACCIONES

VM - P 202.05MB

Mini Stieglitz ◀

Extracción de fragmentos
radiculares luxados

Acceso facilitado
en alvéolos estrechos.



CIRUGÍA ORTODÓNTICA



H31LR.316.016

► *Fresa quirúrgica monobloque*

Corte rápido y seguro,

Permite crear un "paso" para
la inserción de botadores
o forceps.



DKO254 BN.316

► *Tratamiento "Drako"*

Secciona rápidamente
dentina y hueso.

LASER POINT

Bisturí rotativo ◀

Gracias a la transformación de la
energía cinética en calor,
corta y cauteriza,

Ideal para gingivectomías y
frenectomías, se usa sin agua.

STRIPPING



392.314.016F

- "Micro fisura"

Forma afilada con punta muy fina diseñada para abrir los puntos de contacto y luego realizar el stripping.



859L.010

- Fresa dorada de grano medio

Llama fina con granulometría media para un stripping rápido.



UHD859L.314.009F

- Larga durabilidad ◀

Llama de larga durabilidad con granulometría fina,

Permite realizar el stripping con un excelente control,

El grano F deja la superficie bien acabada.



FRES120FULL UP


► *Disco mini*

Espesor 0,1 mm

Diámetro 12 mm

Grano fino

Ideal para stripping en premolares.

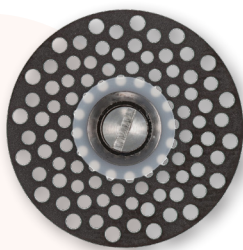

CENTO CA

► *Disco DKO*

Espesor 0,09 mm

Cien agujeros para enfriamiento

Diamante de larga durabilidad

¡el mejor producto para stripping!



FRESISLIM - 204

► *Disco ultraflexible*

¡El más fino 0,06 mm!

Su flexibilidad unida al mínimo espesor hace que este disco sea excelente para un stripping delicado pero efectivo


Se adapta perfectamente a la superficie del diente.



STRIP DIA

► *Tiras de diamante para stripping*

Diamante multicapas, espesor 0,03 mm, granulometría M para stripping, F para acabado, SF para eliminación de manchas interproximales. La "sierra" en la parte central facilita su inserción.

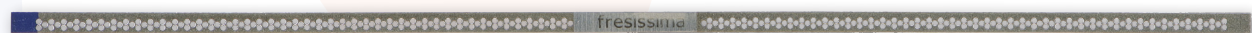

STRIP DIA MINI

► *Tiras de diamante estrechas*

Espesor 0,04 mm.

DEBONDING



C379.204.023

- *Multihojas para contraángulo*

Carburo de tungsteno monobloque

Ataque CA para una eliminación segura y controlada del composite.



HD862 FG-012 UF

- Grano ultra fino 8 μm ◀

Eliminación de cemento ortodóntico.



H7642.314.010

- *Multihojas monobloque*

Las 12 hojas helicoidales permiten una rápida eliminación de la mayor parte del composite.



H9642.314.010

- Multihojas monobloque* ◀

Gracias a sus 30 hojas elimina los restos de composite sin rayar el esmalte.

BOND REMOVING

► Goma especial ◀

Libre de abrasivos duros

Excelente para eliminar el cemento ortodóntico de la "textura" del diente, permite insistir hasta la completa eliminación de todo el composite con la certeza de no rayar la superficie del diente.



Medio



Fino



KD 541.070 CA

KD 541.070



F 090

F 090 MINI M

KEVLAR DIAMANTADO

► Sistema de pulido ◀

Elimina las superficiales presentes en el esmalte

Altísima resistencia a los ciclos de esterilización.

FIELTRO DIAMANTADO

Pulido de esmalte ◀

La pasta de diamante presente en el interior del instrumento sale con la rotación

Utilizada con agua permite un excelente pulido del esmalte.

INSTRUMENTOS AUXILIARES

2MIRROR

- *Total reflex system*

Espejo doble

Alta reflexión para una excelente visibilidad

Los dos lados reflectantes facilitan la colocación de los brackets en las zonas posteriores.



PROFILAXIS



SM 229.050 CA

- *Cepillo interdental de nylon*

Adecuado para la limpieza entre brackets y dientes.



SM 835 ORANGE

- ◀ *Cepillo suave*

Gracias a su suavidad es adecuado para pacientes con encías sensibles.

FRESAS PARA YESO (MODELOS)

H79 SS.104.040

► Fresa para yeso

Corte especial serpenteado diseñado para el acabado de las escayolas más duras

Gracias a la "serpentina" que permite la eliminación de escombros, la fresa permanece limpia.



H251SG.104.060

Fresa para yeso ◀

El corte con ángulo modificado permite desbastar escayola dura sin saltos

Alta resistencia

Utilizable también en resina.



H79SGE.070 HP

► Fresa para escayola

Corte extra grueso para mayor rapidez.

TRABAJO Y ACABADO DE PLACAS, ALINEADORES, FÉRULAS



H251XQ.104.040

► Corte especial en CT ◀

Útil para acabar tanto resinas duras como blandas


La particular forma redondeada de la cabeza permite trabajar sin crear escalones y depresiones.



H77EFSXG.040HP

Corte especial en CT ◀

Amplias hojas que penetran en materiales blandos como resinas para ferulas, termoplásticos y siliconas sin embotarse.

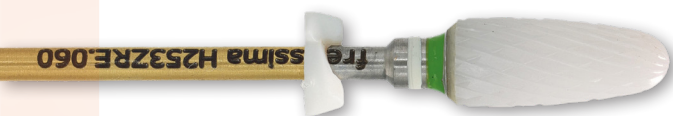

H253ZRE.104.060

► Fresa de zirconia ◀

Utilizada a baja velocidad permite trabajar eficazmente sobre materiales termoplásticos.




H219.104.023

"Cuchillo" de resina ◀

Acaba la resina cerca de los aditamentos y alambres evitando dañarlos porque "resbala" sobre el metal


Útil como cuchillo para cortar bases o acabar bordes de bite en resina blanda sin embotarse.

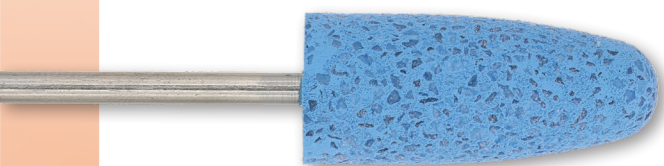

9489C.104.100

► Goma de acabado ◀

Ideal para resinas "especiales" como nylon, silicona y materiales blandos.

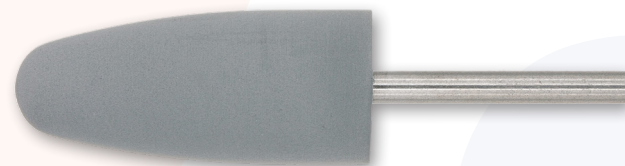

CONNECTO REMOVER

Goma suave ◀

Excelente paso de pulido final en los bordes de ferulas, siliconas y termoplásticos.

HD911 SC



► *Disco de diamante*

Estables y rápidos para separar las placas de los aparatos ortodónticos

Ideal para cortar resinas termoplásticas utilizadas en ortodoncia para placas con expansores.

SUN 250



SUN 250 YELLOW

► *Cepillos multicapas* ◀

Acaban superficies de resina eliminando las rayas dejadas por las fresas gruesas.

Ideales para ferulas de resina y aparatos ortodónticos, donde los particulares "rayos" alcanzan cualquier punto de difícil acceso.



SUN 250 WHITE



SUN 270.22 GREEN

SCOTCH BRITE


Acaban tanto la resina de las ferulas (rígidos o flexibles) como la resina de aparatos ortodónticos

Excelentes para alisar, satinar y redondear los bordes de los aparatos.



SM 300.22 WHITE

TEJIDO MULTICAPA IMPREGNADO

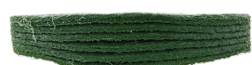

DD 970F GREEN

► *Paño multicapa* ◀

Ideales para pulir y abrillantar, sin pastas adicionales, las superficies de resina

Suaves y flexibles se adaptan especialmente a la conformación de ferulas y aparatos ortodónticos.



DD 970F PINK

CORTE DE LOS ALAMBRES



666T22X02

► *Disco separador*

Corta rápidamente los alambres metálicos

El refuerzo de fibra de vidrio reduce el riesgo de fractura.



1310

Goma suave y flexible ◀

Acaba y pule los alambres metálicos

Útil para redondear y pulir las zonas de contacto.



DUROSINT

► *Disco sinterizado*

Para cortar alambres de acero

Alternativa al carborundum, ya que, al estar completamente diamantado, su consumo es reducido y uniforme, y el operador evita así tener que atornillar el disco al mandril cada vez.



HXU46.314.012

Fresa de carburo de tungsteno monobloque ◀

Corte rápido de alambres con turbina.