

vademecum ZIRCONIA

preparación fase CAD: modelo y muñones

Para conseguir un escaneado exacto, el modelo en yeso y los muñones desmontables necesitan una cura en los mínimos detalles: disco **PATTERNS CUT**, línea fresas en carburo SS, H8000, H71E.023 y fresas diamantadas de "bola" **DHP71 4020**.

fresissima® PATTERNS CUT

- ▶ disco cortayeso

Evita de embotarse

Rápido

Preciso

Transparente



fresissima® H79 SS.040

- ▶ acabado de los muñones

Descarga los residuos de yeso

Evita de embotarse

Superficie bien acabada

Corte siempre limpio



fresissima



fresissima® H8000

- biselar el muñón desmontable

Carburo de tungsteno integral

Evita de "astillar" el yeso

Corte vigoroso y preciso

Superficies lisas



fresissima® DHP71 4020

delineación
de borde marginal ◀

Diamante grano medio

Elevada capacidad de abrasión

Evita de embotarse

Superficies bien acabadas



fresissima® H71E.023

► definición
margen de cierre

Mayor control

Alta capacidad de corte

Eficaz sobre yesos extraduros



elaboración "zirconia" pre-sinterizada

"Pieza al estado blanco" antes de la sinterización.



fresissima®

PATTERNS CUT

Corta piezas de frame ◀
(discos de zirconia cruda)

Corte vigoroso

Rígido y estable

Preciso y controlable



fresissima®

H129EF.023

acabado ◀

Regulación de los espesores de los bordes

CT extraduro monobloque

Corte cruzado fino

Mayor estabilidad

fresissima® CONNECTO-REMOVER

▶ alisadura superficial

Refina los márgenes de la corona

Goma blanda

No mancha



fresissima®

H219

separación de los conectores ◀
de la matriz

Fresa con solas esquinas vivas

Es muy precisa

Preserva las estructuras cercanas



fresissima® H79ZF.040

▶ acabado

Remueve la parte excedente
del conector

CT extraduro monobloque

Corte cruzado super-fino

Hojas muy afiláis





fresissima®

222 T.DIA 20x02

disco telado-diamantado ◀

Corta y separa

Consumo reducido y uniforme



fresissima®

HDHP 368Z

▶ diamantadas High Durability

Trabaja también en seco sin
excesiva producción de calor

Velocidad Max 8000 rpm

fresissima®

DKO BLACK

diamantado para FG ◀

Elevada capacidad de corte

Buen acabado

Duración superior

Utilizar con agua



fresissima®

Z371 FG

▶ acabado superficial
de la estructura

Inclinación 1°

Garantiza óptima
fuerza de adhesión

Buena retención
mecánica por la cerámica



fresissima®

HD 856

línea High Durability ◀
para turbina

Alta capacidad de abrasión

Resistente al calor

Se aconseja con refrigeración
por agua





fresissima®

ZIRCSTONE 716

fresa diamantada sinterizada ◀

Abrasa y refina (5000 rpm)

Limita el sobrecalentamiento

Evita de producir polvo

Duración notable

fresissima®

ZIRC 735

▶ piedra montada especial

Mezcla sinterizada

Elevada resistencia al calor

Alta duración

Ideal por los espacios interproximales



fresissima®

DLC 652C

especial mezcla extradura ◀

Diamante de grano cerámico

Elevada capacidad abrasiva

Alta resistencia al calor

fresissima®

PLZ 703

▶ piedra montada mezcla extradura


Alto grado de acabado

Limita el sobrecalentamiento

Duración elevada



fresissima

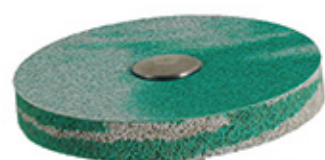

fresissima®

GEMINI RUOTA

sistema diamantado-sinterizado ◀

C fresa, F leviga

Trabaja sin calentar
y opacar las superficies

Elevada resistencia a la usura

Velocidad aconsejada 5000 rpm



fresissima®

GEMINI 799

▶ sistema diamantado-sinterizado

Diámetro 11 mm

Mayor control

Se adapta mejor a los espacios reducidos

Velocidad aconsejada 8000 rpm



fresissima®

ZIRC 825.160

goma sinterizada ◀

Pule y abrillanta
en los espacios más estrechas

Velocidad aconsejada 5000 rpm





fresissima® SINTY GOLD

disco diamantado ▲
sinterizado

Separa sin dejar
rayas negras sobre el manufacto

Sutil, evita ampliar los
espacios interproximales




fresissima® FRESISLIM 190

▲ disco diamantado
ultrasutil

Contornea y remodela
coronas y puentes en cerámica

Ultra flexible

Sutil

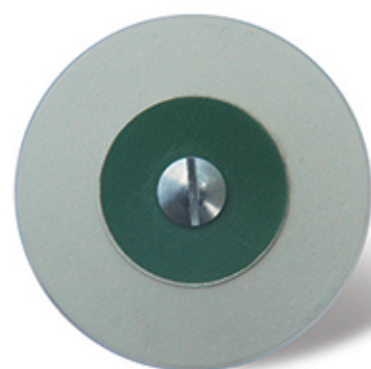

fresissima® DISCHI DIALUX

sistema ▲
diamantado-sinterizado

Sutil sobre todo para los espacios
interproximales

Puede sustituir la "glasure" consiguiendo
una superficie más natural

fresissima® HXU33RS.009

► CT extraduro monobloque FG

Punta sutil y corte afilado
para acabar los surcos con precisión

Pulveriza la cerámica
evitando de astillar



fresissima® HL 6 FACCE

► frese da FG

Esquinas "vivas" para incidir los surcos
Sobre la cerámica

Extremadamente precisa





fresissima®
DISTENO 139ZF-M

carburo diamantado ◀
por laboratorio

Trabaja evitando brincos

Reduce el riesgo
de astillar la cerámica

Evita de dejar rayas
negras sobre la cerámica



fresissima®
SD 856F

fresas diamantadas ◀
sinterizadas

Alta concentración de diamante

Duración muy elevada

Consumo gradual y uniforme

Evita la contaminación




fresissima®
H71.002 - 004

micro roseta ◀
CT monobloque

Rediseña los surcos
con precisión sin ampliarlos

Óptimo rendimiento a elevada
velocidad y a baja
presión operativa

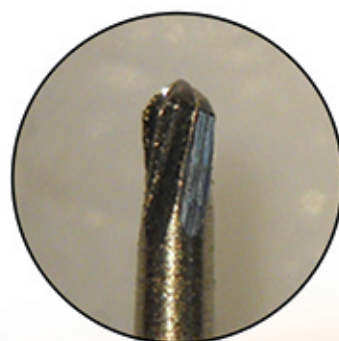

fresissima®
HDHP 858

▶ fresas diamantadas
High Durability

Mayor duración del diamante
sobre las puntas y sobre las esquinas

Corte vigoroso y agresivo

Evita de dejar rayas
negras sobre el manufacto



fresissima®
KIT FIBER HP

▶ fibra de vidrio por acabado

Diámetro punta 1,0 mm

Refina y pule surcos y
espacios interproximales

Importante
Velocidad max 5000/7000 rpm

fresissima®
ZIRC 661

- piedra montada especial

Mezcla sinterizada

Elevada resistencia al
calor

Alta duración



fresissima®
PLZ 721

- piedra montada mezcla
extradura

Alto grado de acabado

Limita el sobrecalentamiento

Duración elevada



fresissima®
DLC 652M

- especial mezcla extradura

Diamante de aglutinante cerámico

Elevada capacidad abrasiva

Alta resistencia al calor





fresissima® ZIRCSTONE RED LENTE

fresa diamantada ◀
sinterizada

Ideal para zirconia integral

Abrasa y refina (5000 rpm)

Limita el sobrecalentamiento

Evita de producir polvo

Mayor grado de abrasión



fresissima® GEMINI RUOTA SF

▶ sistema
diamantado-sinterizado

SF abrillanta

Trabaja sin calentar
y opacar las superficies

Elevada resistencia a la usura

Velocidad aconsejada 5000 rpm



fresissima® DKO BLACK

◀ diamantado de FG ▶

Elevada capacidad de corte

Buen acabado

Duración superior

Útil el "contraste" entre el color negro
de la fresa y la parte de retocar



fresissima® LINEA HD UF

◀ High Durability de FG ▶

Diamante ultra fino

Resistente al calor



fresissima® LINEA HD

◀ linea High Durability
de turbina ▶

Alta capacidad de abrasion

Resistente al calor

Se aconseja baja presión
operativa



fresissima® GEMINI

◀ sistema de pulido
diamantato sinterizado ▶

“fresa”

Instrumentos por retoques

Elimina el paso de las fresas



030 C



040 C

“leviga”

Evita de calentar y opacar

Sterilizable en autoclave
sin perdida de color



030 F



040 F

“brillante”

Elevada resistencia a la usura

Útiles sobre todo por zonas oclusales



030 SF



040 SF



fresissima®

ZIRC 792.040 CA

goma sinterizada ◀

Refina y pule en un sólo paso

La punta permite de acabar
también surcos más profundos

fresissima®

SD 9792.040 CA

▶ goma sinterizada

Útil para abrillantar las superficies



fresissima®

2101 - 2102 - 2103▲ gomas negras diamantadas ▲
1° paso

Rápida eliminación de las rugosidades



fresissima®

0332 - 0334 - 0335▲ gomas grises diamantadas ▲
2° paso

Permiten superficies perfectamente brillantes



eliminación de coronas en zirconia



fresissima®

ZIRC CUT

disco diamantado ◀

Es pequeño para facilitar
el corte en los espacios más reducidosCuello estrecho para facilitar
un corte más profundoEs completamente diamantado
(no tiene el tornillo)

fresissima®

HD 835 UG

▶ cerámica y zirconia

Diamante ultra grueso

High Durability

Corte vigoroso y rápido



fresissima